


Sterican® Safety

Sicher arbeiten – für Ihre Gesundheit!

- Fest mit dem Kanülenansatz verbundener Schutzschild, der die Kanüle nach der Aktivierung irreversibel umschließt
- Schutzschild kann stufenlos zurückgeklappt werden und verbleibt in der eingestellten Position
- Das Schliffauge ist immer in Richtung des Schutzschildes ausgerichtet (Bevel-Up-Ausrichtung)
- Dünnwand-Kanüle aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit feindosierter Silikonbeschichtung und 3-fach Facettenschliff
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Alle Größen kompatibel mit Luer-Lock- und Luer-Steck-Spritzen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Latex-, PVC- und DEHP-frei
- Entspricht der TRBA 250, Absatz 4.2.5 – Prävention von Nadelstichverletzungen

Aktivierung des Sicherheitsmechanismus durch

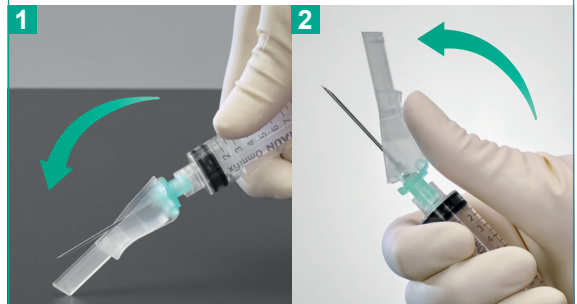

Drücken des Schutzschildes gegen eine geeignete feste und gerade Oberfläche **1** oder Drücken des Daumens oder Zeigefingers gegen die strukturierte Fläche des Schutzschildes **2**, bis das Einrasten zu spüren ist und durch ein hörbares „Klicken“ bestätigt wird.

Sterican® Safety Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge	Ø x Länge	Art.-Nr.	PZN	VE	Bestellmenge
■ 30 G x ½"	0,30 x 13 mm	262278	13353705	100 Stück	
■ 27 G x ½"	0,40 x 13 mm	262218	13353734	100 Stück	
■ 26 G x ½"	0,45 x 13 mm	262309	13353740	100 Stück	
■ 25 G x ⅝"	0,50 x 16 mm	262207	13353757	100 Stück	
■ 25 G x 1"	0,50 x 25 mm	262203	13353763	100 Stück	
■ 25 G x 1½"	0,50 x 40 mm	262262	13353786	100 Stück	
■ 23 G x 1"	0,60 x 25 mm	262204	13353800	100 Stück	
■ 23 G x 1½"	0,60 x 40 mm	262305	13353823	100 Stück	
■ 22 G x 1"	0,70 x 25 mm	262306	13353846	100 Stück	
■ 22 G x 1½"	0,70 x 40 mm	262202	13353875	100 Stück	
■ 21 G x 1"	0,80 x 25 mm	262304	13353881	100 Stück	
■ 21 G x 1½"	0,80 x 40 mm	262205	13353906	100 Stück	
■ 20 G x 1½"	0,90 x 40 mm	262206	13353929	100 Stück	
■ 19 G x 1½"	1,10 x 40 mm	262307	13353668	100 Stück	
■ 18 G x 1½"	1,20 x 40 mm	262308	13353698	100 Stück	

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Um den Anwenderfilm zum Produkt auf Ihrem Handy anzusehen sowie Informationen zum Produkt zu erhalten, einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones und einer geeigneten Readerapplikation einscannen und zur Website gelangen.

Neuer reduzierter Preis pro 100 Stück:

~~17,85 €~~ **14,90 €**
zzgl. MwSt.

Absender: Name/Adresse/Praxisstempel

X

INTERMED

ISG Intermed Service GmbH & Co. KG
Freefax 0800 0850-114
shop.intermed.de